

品 名		エクスジェル® アウルアクティブ		エクスジェル® アウルアクティブ ロータイプ		
品 番		OWA01ー色番ーサイズ		OWA02ー色番ーサイズ		
サイズ (mm) ・ 重量 (kg) ※製品サイズ、重量は 個体差があります。	3240	W320×D400×H95 ・約 1.7		W320×D400×H65 ・約 1.5		
	3440	W340×D400×H95 ・約 1.8		W340×D400×H65 ・約 1.6		
	3442	W340×D420×H95 ・約 1.9		W340×D420×H65 ・約 1.7		
	3446	W340×D460×H95 ・約 2.1		W340×D460×H65 ・約 1.8		
	3640	W360×D400×H95 ・約 1.9		W360×D400×H65 ・約 1.7		
	3642	W360×D420×H95 ・約 2.0		W360×D420×H65 ・約 1.8		
	3646	W360×D460×H95 ・約 2.2		W360×D460×H65 ・約 1.9		
	3840	W380×D400×H95 ・約 2.0		W380×D400×H65 ・約 1.8		
	3842	W380×D420×H95 ・約 2.1		W380×D420×H65 ・約 1.9		
	3846	W380×D460×H95 ・約 2.3		W380×D460×H65 ・約 2.0		
	4040	W400×D400×H95 ・約 2.1		W400×D400×H65 ・約 1.9		
	4042	W400×D420×H95 ・約 2.2		W400×D420×H65 ・約 2.0		
	4046	W400×D460×H95 ・約 2.5		W400×D460×H65 ・約 2.1		
カラー (色番)		ベース／ブラック、 アウルパッド／レッド				
		カバー／ブラック (BK)、レッド (RD)、ブルー (BL)、グリーン (GN)、ピンク (PK)				
材 質	ベース	表 材	ポリエステル 100%			
		マ チ	ウレタン合成皮革			
		中 材	ウレタンフォーム			
		裏 材	滑り止め加工付きナイロン			
	アウル パッド	表 材	ウレタン合成皮革			
		中 材	エクスジェル® (合成ゴム)、ウレタンフォーム			
		裏 材	ポリエステル 55% ・ ポリウレタン 45%			
		ベルト	滑り止め加工付きポリエステル			
	カバー	表 材	ポリエステル 100% ・ウレタンフォーム			
		前マチ	ポリエステル 82%、ポリウレタン 18%			
		後マチ	ポリエステル 100%			
		裏 材	滑り止め加工付きナイロン			
		ベルト	ポリプロピレン 100%			

※「色番」は、「BK」「RD」「BL」「GN」「PK」が入ります。
※「サイズ」は、「3240」「3440」「3442」「3446」「3640」「3642」「3646」「3840」「3842」「3846」「4040」「4042」「4046」が入ります。
※アウルパッドは、OWA01 と OWA02 で共通になります。別売りのアウルパッドカバーにつきましても OWA01 と OWA02 で共通になります。

製品 / 付属品内容

- ・クッション 1 式 (ベース 1 個、アウルパッド 1 枚、専用カバー 1 枚)
- ・取扱説明書 (本書類) 1 枚
- ・保証書 1 枚

※EXGEL®、エクスジェル® は株式会社加地の登録商標です。
※アウル® は株式会社加地の登録商標です。
※本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

kaji corporation

https://exgel.jp/jpn/

株式会社 加地

《本社》 〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成 1295-3 TEL：0854-54-2288	《横浜営業所》 〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 8-33 サウス・コアビル内 TEL：045-482-3551	《京都営業所》 《けいはんな R&D センター》 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台 3-2-7 TEL：0774-98-2633
---	---	---

OWA01/02-INS-JP03

Made in Japan

EXGEL®

取扱説明書

エクスジェル® アウル^{アクティブ}Active
OWA01/02



アウルパッド + ベース



カバー

安全に正しくお使いいただくために

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。


※上記画像は OWA01-RD-3446 です。
※写真は現物とは異なる場合があります。

正しい使い方

■ 設置方法

- ① ベースの上にアウルパッドをセットします。
- ② ベースとアウルパッドに専用カバーを装着します。

その際アウルパッドは凹凸面が上側に、カバーは滑り止めが下側になるように装着してください。

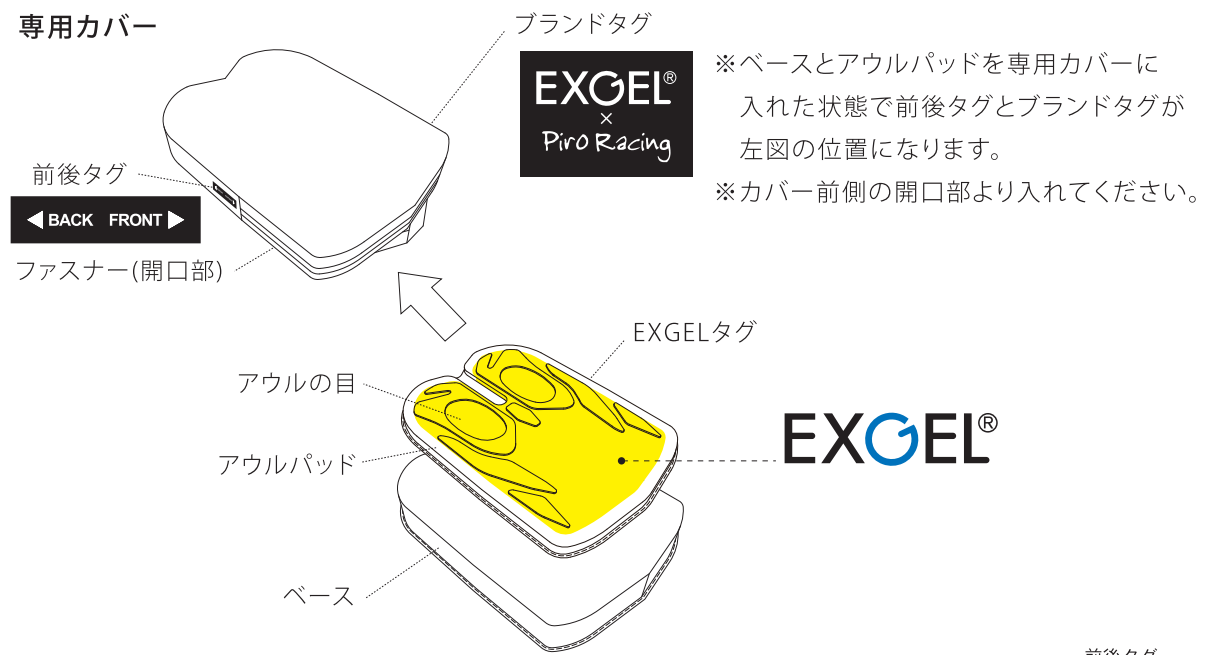


- ③ 車椅子の上に右図のように前後タグの表示に従ってクッションを置いてください。

※カバーのファスナーが前側になります。

※クッションが持ちやすいように専用カバー裏面にはベルトを、アウルパッド裏面には滑り止め加工付きベルトを取り付けています。

※クッションは吊して保管しないでください。変形や破損の原因になります。

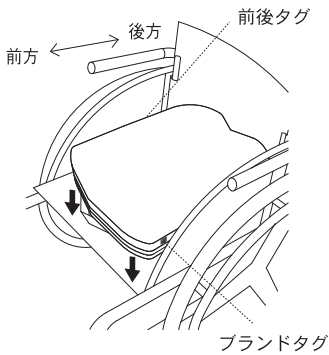

- ④ 最も圧力のかかる坐骨部がアウル目の中央部に来るように座ってください。

⚠ 移乗の際は身体をしっかりと支え、転倒や転落に充分にご注意ください。
クッションの厚さにより車椅子のフットレストの高さ調整などを行ってください。
クッションは医師や専門家にご相談のうえで使用ください。
ご自身で身体を支えられない方は、必ずどなたか立ち会いのもとで使用ください。

■ 消毒（アウルパッド）

- 消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ります。
次亜塩素酸ナトリウムを用いた場合は、長時間放置せず乾いた布で拭き取ってください。
- 消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。
但し、次亜塩素酸ナトリウムを用いる場合は、水で0.1%に希釈して使用してください。
原液または高濃度で使用すると製品表面が劣化する恐れがあります。
※ベースとカバーは消毒できません。

使用上の注意事項（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

- クッションをご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。
- 分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。

⚠ 注意

- ベース、アウルパッドは、水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
洗濯機や乾燥機などは使用できませんのでご注意ください。
汚れた場合は、水またはお湯で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませ拭き取ってください。
- 取り外したカバーは、家庭用中性洗剤で洗濯できます。(洗濯ネットの使用をお勧めします。)
色落ちすることがありますので、白物と一緒に洗わないでください。
漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
アイロンや乾燥機等は使用できません。
乾燥する際は日陰で平干ししてください。
煮沸消毒はできません。
ドライクリーニングはできません。
- 疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。
その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- 水周り（お風呂等）で使用しないでください。
- 本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- 長期間クッションの上に重量物を置かないでください。
クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- 製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- 切断したり穴を開けて使用しないでください。
- 誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- 本製品を設置する椅子やシートの材質によっては、稀に摩擦で設置面を傷めたり、色移りする場合があります。設置の際はご注意ください。
- ご使用になる場所やご使用方法、洗濯方法等により、製品裏材の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。
- カバーは使用中の摩擦や洗濯により、毛羽立ちや毛玉（ピル）が生じる事がありますので、取扱いには注意して下さい。

保管方法

- 製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- 80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- 製品を保管する際は、立て掛けずに設置の場合と同じような状態で置いてください。
- 直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- 廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。